


取扱説明書

ポータブル口腔洗浄器

LS-QD01A

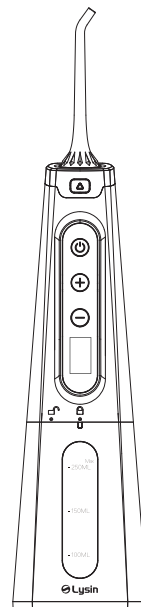

 ライシン株式会社

〒329-4307 栃木県栃木市岩舟町静1451-2
TEL:0282-25-7534 FAX:0282-25-7543
E-Mail:support@lysin.jp

※お手数ですが、部品が足りない場合や商品が破損していた場合は、商品受領後1週間以内にご連絡ください。

 Lysin

もくじ

安全上での注意	03-04
警告・危険	04
各部名称	05
セット内容	06
ディスプレイについて	06
ノズルの用途別	07
使用方法	08-11
お手入れ方法	12
バッテリーについて	12
こんなことが起きたら	13-14
仕様	15

ご使用になる前に

このたびは、ご購入いただきありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくために、この説明書をよく読んでからご使用ください。

安全上での注意


- ・本製品を口腔衛生以外の目的で使用しないでください。
- ・怪我を防ぐために、ノズルを歯茎や歯に無理に押し込まないでください。
- ・本製品に水以外の液体(液体歯磨きも不可)を入れしないでください。口に液体歯磨きを含んだ状態での使用は可能です。
- ・本製品を使用する前に、マウスピース矯正等のものを取り外してください。
- ・安全のために正しい電源、電圧で使用をしてください。
- ・お子様が本製品で遊ばないように注意してください。
- ・本製品は、小さいお子様、関連する経験や知識のない人、身体的、感覚的、精神的障がいのある人が使用することを意図したものではありません。
- ・電源コードが損傷している場合は、本製品を使用しないでください。
- ・USB充電ケーブルやデバイスを無理に伸ばしたり、曲げたり、ねじったりしないでください。また、デバイスの上に重いものを置いたり、他の物の間にデバイスを挟んだりしないでください。
- ・本製品は本書に記載されている使用目的でのみご使用ください。メーカーが推奨していないアタッチメントは使用しないでください。
- ・睡眠中や眠気のある状態では絶対に使用しないでください。
- ・感電する恐れがあるため、給水する前は製品のプラグを抜いてから給水を行ってください。
- ・給水タンクに水を入れる際は、メモリの「Max」以上給水しないでください。
- ・ノズルが取り付けられていない状態でご使用しないでください。
- ・お子様は、保護者なしで本製品の清掃やお手入れを行わないでください。
- ・お手入れ前には、電源がオフになっている、充電口キャップがついている、充電されていないことを確認してください。
- ・直射日光が当たる場所、高温多湿な場所や屋外には保管、放置しないでください。製品の劣化、破損の原因となる恐れがあります。
- ・ほこりの多い場所、湿気の多い場所、火災の危険がある場所では使用しないでください。
- ・異物(針など)を差し込まないでください。

- ・本製品は、防水ですが意図的に水をかけたりしないでください。
- ・本製品を改造などしないでください。むやみに改造すると、不具合の原因となる恐れがあります。
- ・お客様のお取り扱い不注意、改造等により不具合が生じた場合、お客様責任となります。
- ・長期間使用しなかった場合は、製品に異常がないかよく確認してください。
- ・本製品の所有者は、使用前に全ての使用者が全ての警告及び注意をよく理解していることを確認する責任があります。
- ・当製品をご使用上発生した故意又は過失による損失及び損害に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご承知おきください。
- ・この説明書を紛失しないよう保管してください。

⚠ 警告・危険


- ・入浴中は使用しないでください。
- ・浴槽、シャワー室、流しに落下する可能性のある場所に製品を置いたり保管したりしないでください。
- ・水などの液体の中に入れて、落としたりしないでください。
- ・水に落ちた製品に手を伸ばさしないでください。すぐにプラグを抜いてください。
- ・充電中は濡れた手で本体やUSB充電ケーブルを扱わないでください。
- ・歯周炎を患っている方、または過去2か月以内に口腔外科手術を受けた方は、本製品を使用する前に医師に相談する必要があります。
- ・火傷や故障を防ぐため、給水タンクに40℃以上の温水を入れて使用しないでください。

各部名称

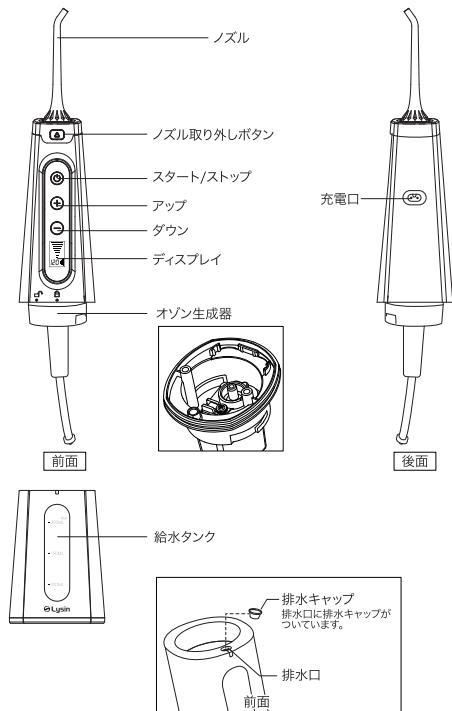


セット内容

商品が届きましたら、不備がないか必ず確認してください。

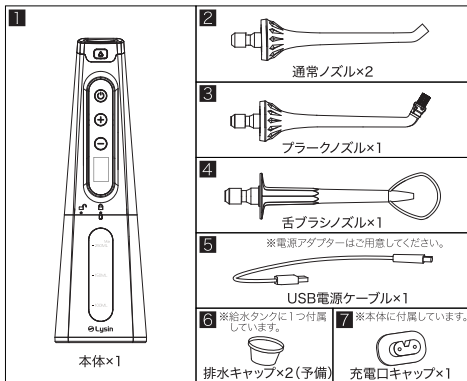


ディスプレイについて

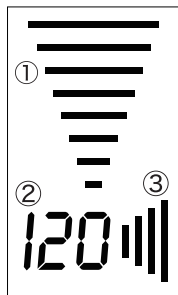


- ① 水圧
水圧を8段階で表示します。
→水圧については10ページの「水圧を選択」を参照。
- ② 時間
使用時間を表示します。
1度に使用できる時間は、120秒(2分)です。120秒後は自動で停止します。
- ③ 電池残量
電池の残量を4段階で表示します。→11ページの「充電」を参照。

ノズルの用途別

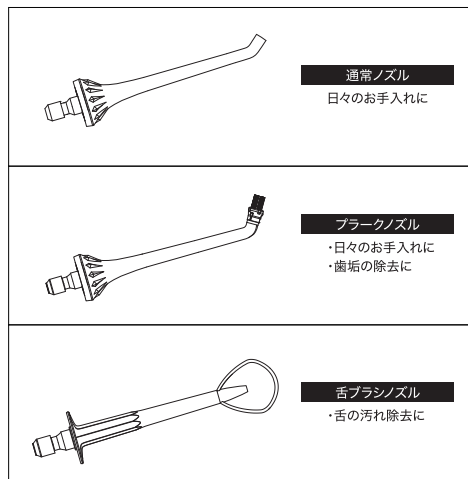


使用方法

始める前にUSB充電ケーブルを充電口に接続し、完全に充電されていることを確認してください。充電中は使用できません。

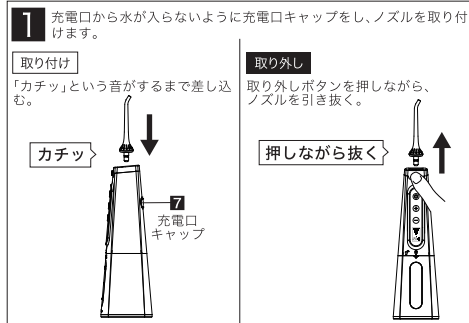

使用中は、充電口キャップを必ずつけてください。

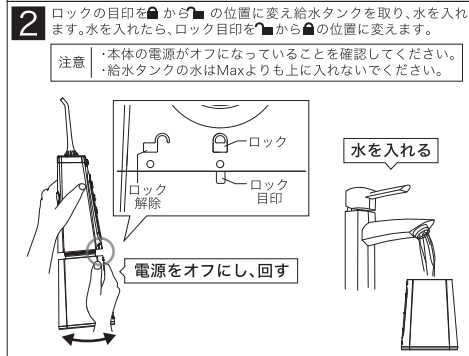

使用する前に

1. 上体を前屈みにし、ノズルを口の中に入れ、歯、歯茎、または歯の間に向けます。
2. ノズルを回転させて、水の流出方向を調整し、洗浄したい部分に垂直になるようにします。水がすぐに流れるように、口が十分に開いていることを確認してください。

初めて使用される方

初めて口腔洗浄器を使用するときは、一番下の水圧から始めてください。口腔が順応するにつれて、水圧を徐々に上げることができま。使用中にかゆみや歯茎の出血が発生する場合があります。

これは正常であり、通常は1～2週間ほどで出血が緩和されます。

使用する

スタート スタート/ストップボタンを1秒間押し続ける。


ストップ スタート/ストップボタンを軽くタップする。

※ 連続使用で120秒経つと、自動で止まります。
再開する場合はスタート/ストップボタンを1秒間押し続ける。



使用時のコツ

奥歯から前歯に向かってクリーニングを始めると効果的です。洗浄中は、ノズルを歯茎のラインに沿って90°動かします。各歯の間に1秒程度当てます(全体で1分程度)。水が飛び散らないように唇を少し閉じますが、水が口から洗面台に自由に流れるように十分なスペースを残してください。

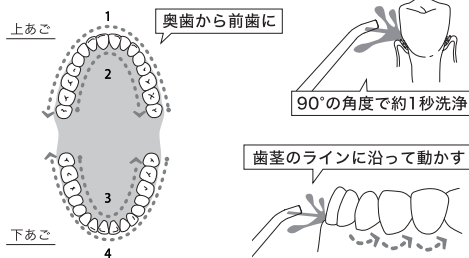

水圧を選択

本製品には8段階の水圧があります。電源がオフのときに水圧ボタンをタップして、目的の水圧を選択します。→06ページの「ディスプレイ」を参照。
水圧については以下のとおりです。

PSI…空気圧の単位



1段階

バーが1つ…水圧は「1」で10～20PSI



2段階

バーが2つ…水圧は「2」で20～25PSI



3段階

バーが3つ…水圧は「3」で25～30PSI



4段階

バーが4つ…水圧は「4」で30～35PSI



5段階

バーが5つ…水圧は「5」で35～40PSI



6段階

バーが6つ…水圧は「6」で45～60PSI



7段階

バーが7つ…水圧は「7」で60～65PSI




8段階

バーが8つ…水圧は「8」で65～100PSI

使用後

使用後は給水タンクに残っている水を捨ててください。本体を作動させ、ノズルから噴射がなくなるまで残っている水を排出して、電源を切ります。給水タンクに水がなくてもノズル内部に水が残っていますとカビの原因、または、次回使用する際にセット時にノズルから水が出てきてしまう場合もあります。

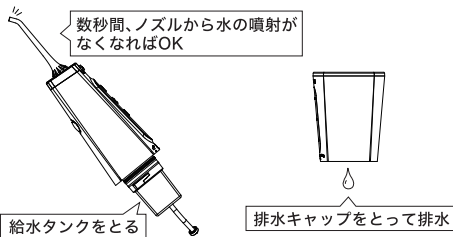

ノズルから水をしっかり排水しないと起こること

ノズルに残った水をしっかり排水しないと次回使用する際にセット時の水圧で水が出てきてしまう場合もあります。

セットしたら勝手に排水される

※故障ではありませんので
ご安心ください。




充電

ディスプレイの右下にある4本の縦棒が電池残量を表しています。左から右に25%、50%、75%、100%の電池残量を表します。フル充電まで約4～5時間かかります。



→ 電池残量

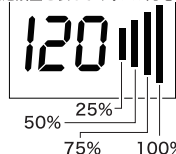

お手入れ方法

本体(本体のお手入れ中は、充電口キャップを必ずつけてください。)きれいな水、または中性洗剤に浸した柔らかな布で表面を拭いてください。腐食性または研磨性の洗剤は使用しないでください。この時に、本体の電源は入れず、電源コードも抜いた状態でお手入れを行なってください。

給水タンク

タンク内を水ですすいでください。給水タンクは洗剤は使用しないでください。水のみでのお手入れとなります。

水垢の除去

使用する水のミネラル含有量によっては、蓄積場合があります。これら(水垢)を除去しないと製品の性能が低下してしまいますので除去してください。

水垢の除去方法はノズルを流しに向け、電源を入れ、すべての水が使用されるまで実行します。給水タンクにきれいな温水(40℃以下)を入れ、上記の手順を繰り返して給水タンクをきれいにします。製品の性能を維持するために、1～3ヶ月ごとにこの作業を繰り返し行なってください。

バッテリーについて

バッテリーの寿命を長持ちさせるためには下記の点を守りながらご使用ください。

1. 充電が100%のまま放置しない
電源が100%になったら、アダプターのコードを抜いてください。電源アダプターを繋ぎっぱなしにしていると「満充電保存」と呼ばれる状態になります。劣化の原因ですので控えてください。
2. 残量が0%のまま放置しない
バッテリーの残量が0%の状態が長期間放置すると、内部の素材が劣化する場合があります。残量が0%になったらすぐに充電してください。しばらく使用しない場合にも定期的に充電し、残量が30～50%ある状態をキープするようにしてください。
3. バッテリーを高温の環境に置かない
リチウムイオン電池の最高許容範囲温度は、約45℃といわれています。高温の場所に置くと、それだけで電池の劣化が進みますので高温の場所に放置することはしないでください。

こんなことが起きたら

電源が入らない	・充電の残量がない →充電をして、再度お試しください。
	・1秒以上長押ししていない →1秒以上長押ししてください。
水が出ない	・給水タンクに水がない →給水してください。
	・本体を傾け過ぎている →大きく傾けずにご使用ください。
	・電源コードがついたまま →電源コードを外してご使用ください。
	・ノズルが正常に取り付けられていない →正しく取り付けてください。 08ページの「使用方法」を参照。
使用中に止まってしまう	・水垢でノズルが詰まっている →正しくお手入れを行ってください。 12ページの「お手入れ方法」を参照。
	・初めの使用。または、長期間使用していない →ノズルを外し、取付け穴に適量の水を加え、再度ノズルを取り付けてください。
	・連続使用時間120秒を超えた →正常です。
使用中に止まってしまう	・給水タンクに水がない →給水してください。
	・本体を傾け過ぎている →大きく傾けずにご使用ください。
	・充電の残量がない →充電をして、再度お試しください。

水圧が足りない	・給水タンクに水がない →給水してください。
	・本体を傾け過ぎている →大きく傾けずにご使用ください。
	・充電の残量がない →充電をして、再度お試しください。
	・水垢でノズルが詰まっている →正しくお手入れを行なってください。 12ページのお手入れ方法を参照。
セットした時に 水が勝手に出てくる	・ノズル内の水が全て排水されていない →ノズル内の排水を行なってください。 11ページの「使用後」を参照。
ノズルと本体の間から 水が漏れる	・ノズルのパッキンの破損 →ノズルを交換してください。
	・ノズルが正常に取り付けられていない →正しく取り付けてください。 08ページの「使用方法」を参照。
給水タンクから水が 漏れている	・給水タンクのパッキンが破損している。また、 入り口に不純物がある。 →弊社までご連絡ください。

仕様

商品名	ポータブル口腔洗浄器(オゾン水)	
型番	LS-QD01A	
定格電圧	3.7V===	
定格電力	5W	
定格防水	IPX7	
充電時間	4~5時間 ※あくまで目安となります。	
入力	5V=== 1A	
アダプター	入力	100-240V~50/60Hz 0.3A
	出力	5V=== 1A 5.0W
オゾン濃度	0.05-1.6PPM	
原産地	中国	

技术要求:

- 1.尺寸: 80x125mm
- 2.材质: 105g双铜纸 骑马钉装
- 3.材料符合ROHS/REACH